


コンファ ウロシステムⅢ フォーリーバルーンカテーテル

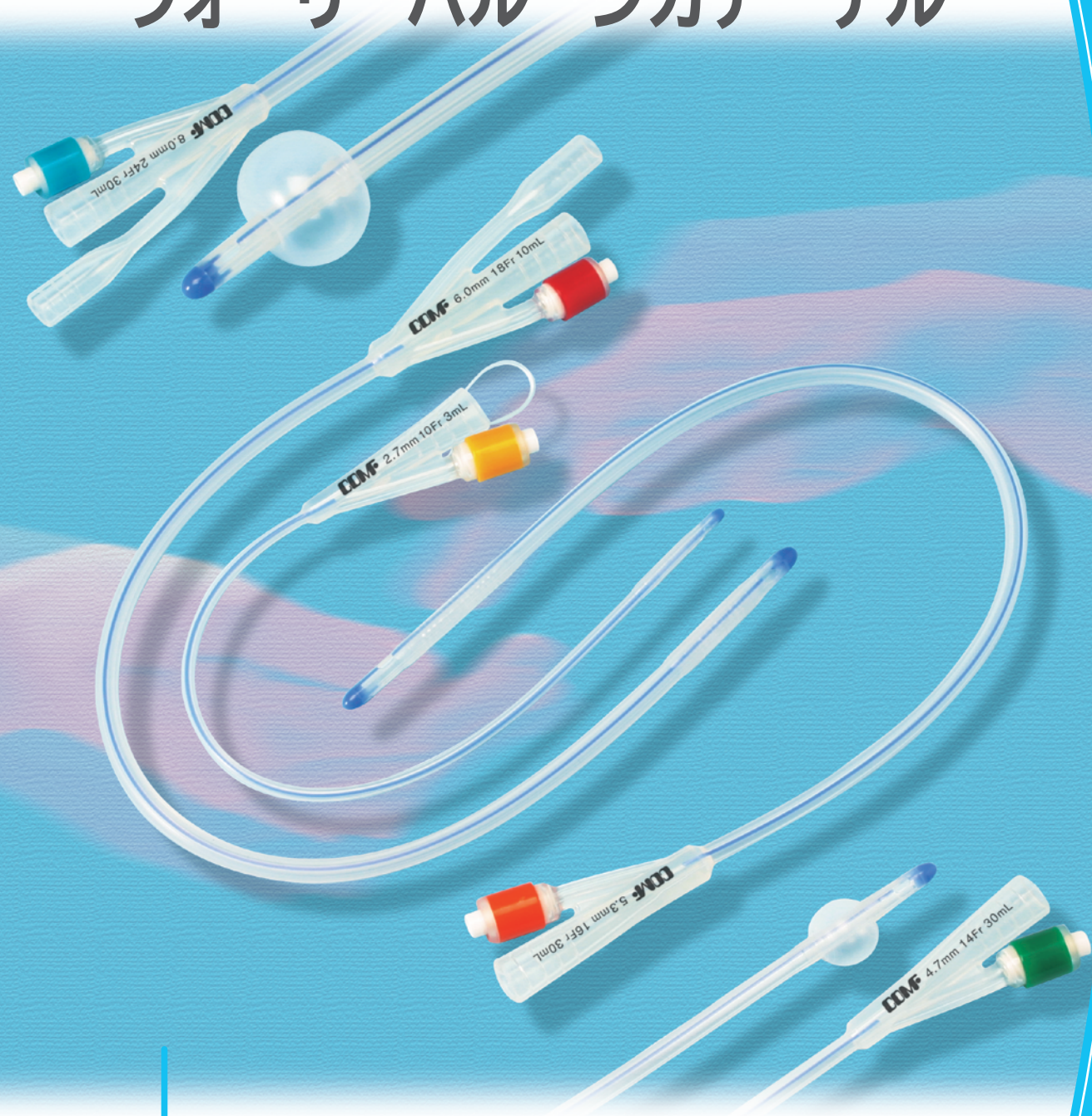

- コンファ ウロシステムⅢ(カテーテル単品)
- コンファ ウロシステムⅢ(チーマン型)
- 滅菌コンファゼリー

製品規格

商品名	商品コード	規格/カラーコード	全長	入数	ケース 入数	JANコード
2WAY フォーリーバルーン カテーテル	802206151	2WAY 6Fr 1.5mL	290mm	10本	6箱	4534089809545
	802208031	2WAY 8Fr 3mL	290mm	10本	6箱	4534089809552
	802210031	2WAY 10Fr 3mL	290mm	10本	6箱	4534089809569
	802212101	2WAY 12Fr 5mL	410mm	10本	6箱	4534089809392
	802214101	2WAY 14Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809408
	802214301	2WAY 14Fr 30mL	410mm	10本	6箱	4534089809415
	802216101	2WAY 16Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809422
	802216301	2WAY 16Fr 30mL	410mm	10本	6箱	4534089809439
	802218101	2WAY 18Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809446
	802218301	2WAY 18Fr 30mL	410mm	10本	6箱	4534089809453
	802220101	2WAY 20Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809460
	802220301	2WAY 20Fr 30mL	410mm	10本	6箱	4534089809477
	802222101	2WAY 22Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809484
	802224101	2WAY 24Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809507
3WAY フォーリーバルーン カテーテル	802314101	3WAY 14Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809576
	802314301	3WAY 14Fr 30mL	410mm	10本	6箱	4534089809583
	802316101	3WAY 16Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809590
	802316301	3WAY 16Fr 30mL	410mm	10本	6箱	4534089809606
	802318101	3WAY 18Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809613
	802318301	3WAY 18Fr 30mL	410mm	10本	6箱	4534089809620
	802320101	3WAY 20Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809637
	802320301	3WAY 20Fr 30mL	410mm	10本	6箱	4534089809644
	802322101	3WAY 22Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809651
	802324101	3WAY 24Fr 10mL	410mm	10本	6箱	4534089809675
2WAY フォーリーバルーン カテーテル チーマン型	802612051	2WAY 12Fr 5mL	410mm	2本	4箱	4534089809958
	802614051	2WAY 14Fr 5mL	410mm	2本	4箱	4534089809965
	802616051	2WAY 16Fr 5mL	410mm	2本	4箱	4534089809972
	802618051	2WAY 18Fr 5mL	410mm	2本	4箱	4534089809989
商品名	商品コード	規格	全長	入数	ケース 入数	JANコード
滅菌コンファゼリー	663000103	5 g	—	100袋	10箱	4534089800108

規 格	償還区分
2WAY 12～24Fr	膀胱留置用カテーテル2管一般(Ⅱ) ①標準型 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般(Ⅱ) ①標準型
2WAY 6～10Fr	膀胱留置用カテーテル特定(Ⅱ) 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル特定(Ⅱ)
3WAY 14～24Fr	
チーマン型	

使用上の注意 尿道をできる限り傷つけないように、良好な排出が得られる限り細いカテーテルをご使用ください。

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合もございますのであらかじめご了承下さい。
※ご使用に際しては添付文書をよくお読み頂くようにお願いします。



株式会社エフスリー

本 社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415
TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233
<E-mail> fine@fthree.co.jp
<HP> https://www.fthree.co.jp/


代理店

オールシリコン フォーリーカテーテル

◎シリコンは生体に対し、組織反応が極めて少なく、生理的にも安定しています。

◎抗血栓性、撥水性、非付着性、耐薬品性、耐熱性、耐老化性などに優れております。

◎非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減する事ができます。

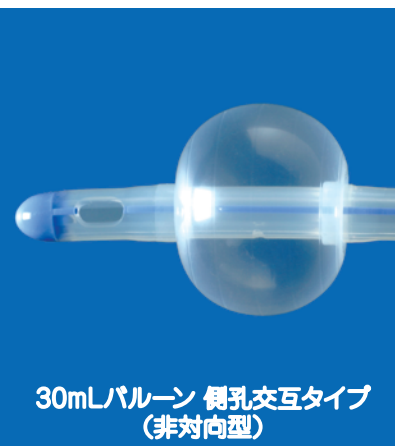

30mLバルーン 側孔交互タイプ
(非対向型)

先端部

丈夫且つ滑らかなシリコン素材の使用により、挿入・抜去がスムーズです。

側孔


十分な大きさを持たせたので、高い排尿率をキープします。

バルーン

破損・収縮・圧力に対する安全性が高く、均一に膨らみます。

シャフト部分

X線造影マーカーを取り付けた事により、留置状態の確認が容易です。また、尿の性状を素早く、正確に知ることが出来ますので、適切な処置に役立ちます。

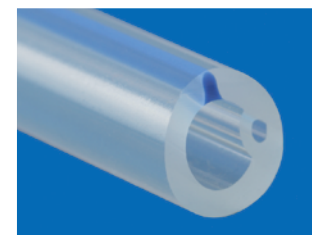

注入部分

バルブはサイズ別にカラーコード化されており、規格（FRサイズ）が一目で分かります。



スタイレット部分

(小児用 6,8,10Frのみ)




ファネル/キャップ部分

ファネルが肉厚なので尿バッグとの接続を確実にします。キャップは持続的膀胱洗浄患者さんにも安心してご使用頂けます。(キャップは3WAYのみ対応)



チーマン型 (ウロシステムⅢ)

◎先端部は、尿道の狭窄した部位を無理なく挿入できるように理想的な角度を付け滑らかに作られております。

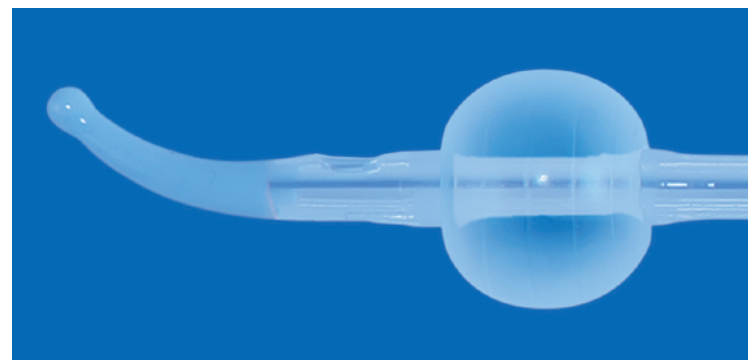

滅菌コンファゼリー

◎導尿カテーテル挿入用の潤滑剤としてご使用ください。

◎ガンマ線滅菌済みで1回のカテーテル挿入に適した容量となっております。

成分:精製水、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、水酸化Na、メチルパラベン

