

# 閉鎖式採尿バッグ (スタンダードタイプ)



●閉鎖式採尿バッグ (スタンダードタイプ)



チャンバー

ストレートタイプでスムーズに尿が落下します。



尿採取口 (ニードルレスタイプ)

針刺し切創防止対策により、尿採取口はニードルレス採尿ポートを採用しました。採尿時には、針の付いてない一般的なスリップタイプのディスプレイが使用下さい。




コック閉

コック開

排尿部分

排尿時に片手で作業できるコックハンドルを使用することにより、簡単に排尿作業ができるようになりました。

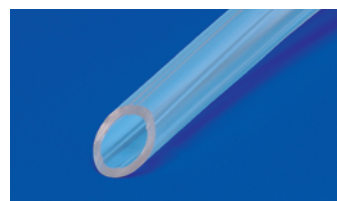

導尿チューブ

導尿チューブを太くすることにより、折れ曲がりにくくなり、尿の流れもスムーズになりました。また、チューブの内側を閉塞しにくい形状にしましたので、万が一折れても尿の流れは確保できます。

## 製品規格

商品名	商品コード	バッグ容量	入数	ケース入数	JANコード
閉鎖式採尿バッグ (スタンダードタイプ)	800025016	2500mL	10枚	6箱	4534089800436

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。

 株式会社エフスリー

本社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415  
TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233  
<E-mail> fine@fthree.co.jp  
<HP> <https://www.fthree.co.jp/>

代理店