

# コンファ オールシリコン フォーリーカテーテル

## 製品規格

商品名	商品コード	サイズ	容量	入り数	カラーコード	標準価格	ケース入り数	JANコード		
2way フォーリーバルーン カテーテル	特定(Ⅱ)	802206151	6Fr	1.5mL	10本入	オレンジ	OP	6箱入	4534089809545	
		802208031	8Fr	3mL	10本入	レッド		6箱入	4534089809552	
		802210031	10Fr	3mL	10本入	イエロー		6箱入	4534089809569	
	2管一般(Ⅱ)①標準型		802212101	12Fr	5mL	10本入	ホワイト	OP	6箱入	4534089809392
			802214101	14Fr	10mL	10本入	グリーン		6箱入	4534089809408
			802214301	14Fr	30mL	10本入	グリーン		6箱入	4534089809415
			802216101	16Fr	10mL	10本入	オレンジ		6箱入	4534089809422
			802216301	16Fr	30mL	10本入	オレンジ		6箱入	4534089809439
			802218101	18Fr	10mL	10本入	レッド		6箱入	4534089809446
			802218301	18Fr	30mL	10本入	レッド		6箱入	4534089809453
			802220101	20Fr	10mL	10本入	イエロー		6箱入	4534089809460
			802220301	20Fr	30mL	10本入	イエロー		6箱入	4534089809477
			802222101	22Fr	10mL	10本入	バイオレット		6箱入	4534089809484
			802222301	22Fr	30mL	10本入	バイオレット		6箱入	4534089809491
			802224101	24Fr	10mL	10本入	ブルー		6箱入	4534089809507
			802224301	24Fr	30mL	10本入	ブルー		6箱入	4534089809514
		802226101	26Fr	10mL	10本入	オレンジ	6箱入		4534089809521	
		802226301	26Fr	30mL	10本入	オレンジ	6箱入		4534089809538	
3way フォーリーバルーン カテーテル		特定(Ⅱ)	802314101	14Fr	10mL	10本入	グリーン		OP	6箱入
		802314301	14Fr	30mL	10本入	グリーン	6箱入	4534089809583		
		802316101	16Fr	10mL	10本入	オレンジ	6箱入	4534089809590		
		802316301	16Fr	30mL	10本入	オレンジ	6箱入	4534089809606		
		802318101	18Fr	10mL	10本入	レッド	6箱入	4534089809613		
		802318301	18Fr	30mL	10本入	レッド	6箱入	4534089809620		
		802320101	20Fr	10mL	10本入	イエロー	6箱入	4534089809637		
		802320301	20Fr	30mL	10本入	イエロー	6箱入	4534089809644		
		802322101	22Fr	10mL	10本入	バイオレット	6箱入	4534089809651		
		802322301	22Fr	30mL	10本入	バイオレット	6箱入	4534089809668		
		802324101	24Fr	10mL	10本入	ブルー	6箱入	4534089809675		
		802324301	24Fr	30mL	10本入	ブルー	6箱入	4534089809682		
チーマン型	特定(Ⅱ)	802612051	12Fr	5mL	2本入	ホワイト	OP	4箱入	4534089809958	
		802614051	14Fr	5mL	2本入	グリーン		4箱入	4534089809965	
		802616051	16Fr	5mL	2本入	オレンジ		4箱入	4534089809972	
		802618051	18Fr	5mL	2本入	レッド		4箱入	4534089809989	
滅菌コンファゼリー	663000103	-	5g	100袋	-	OP	10箱入	4534089800108		

規格	償還区分
2way 12~26Fr	膀胱留置用カテーテル2管一般(Ⅱ)、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般(Ⅱ)①標準型
2way 6~10Fr	
3way 14~26Fr	
チーマン型	膀胱留置用カテーテル特定(Ⅱ)、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル特定(Ⅱ)

### 使用上の注意

尿道をできる限り傷つけないように、良好な排出が得られる限り細いカテーテルをご使用ください。尚、ご使用に際しては、〈添付文書〉を良くお読みくださいますようお願いいたします。

特定保険医療材料 / 認証番号 218AIBZX00059000 (ウロシステム)

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。※ご使用に際しては添付文書をよくお読み頂くようお願いいたします。  
※特注として、2本入対応も可能です。詳しくはご相談ください。

- コンファ ウロシステムⅢ(カテーテル単品)
- コンファ ウロシステムⅢ(チーマン型)
- 滅菌コンファゼリー

株式会社エフスリー

本社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415  
TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233  
〈E-mail〉 fine@fthree.co.jp  
〈HP〉 http://www.fthree.co.jp/

代理店

# オールシリコン フォーリーカテーテル

●販売名: コンファウロシステム  
 ●管理医療機器  
 ●特定保険医療材料/認証番号: 218AIBZX00059000  
 ●泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット  
 ●JMDNコード: 14292000

## オールシリコン フォーリーカテーテル

◎シリコンは生体に対し、組織反応が極めて少なく、生理的にも安定しています。

◎抗血栓性、撥水性、非付着性、耐薬品性、耐熱性、耐老化性に優れています。

◎非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減する事ができます。



30mLバルーン 側孔交互タイプ  
(非対向型)

### 先端部

丈夫且つ滑らかなシリコン素材の使用により、挿入・抜去がスムーズです。

### 側孔


十分な大きさを持たせたので、高い排尿率をキープします。

### バルーン

破損・収縮・圧力に対する安全性が高く、均一に膨らみます。

### シャフト部分

X線造影マーカーを取り付けた事により、留置状態の確認が容易です。また、尿の性状を素早く、正確に知ることが出来ますので、適切な処置に役立ちます。

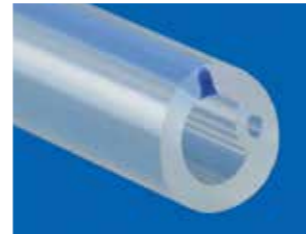

### 注入部分

バルブはサイズ別にカラーコード化されており、規格 (FRサイズ) が一目で分かります。




### スタイレット部分

(小児用 6,8,10Frのみ)




### ファネル/キャップ部分

ファネルが肉厚なので尿バッグとの接続を確実にします。キャップは持続的膀胱洗浄患者さんにも安心してご使用頂けます。(キャップは3WAYのみ対応)

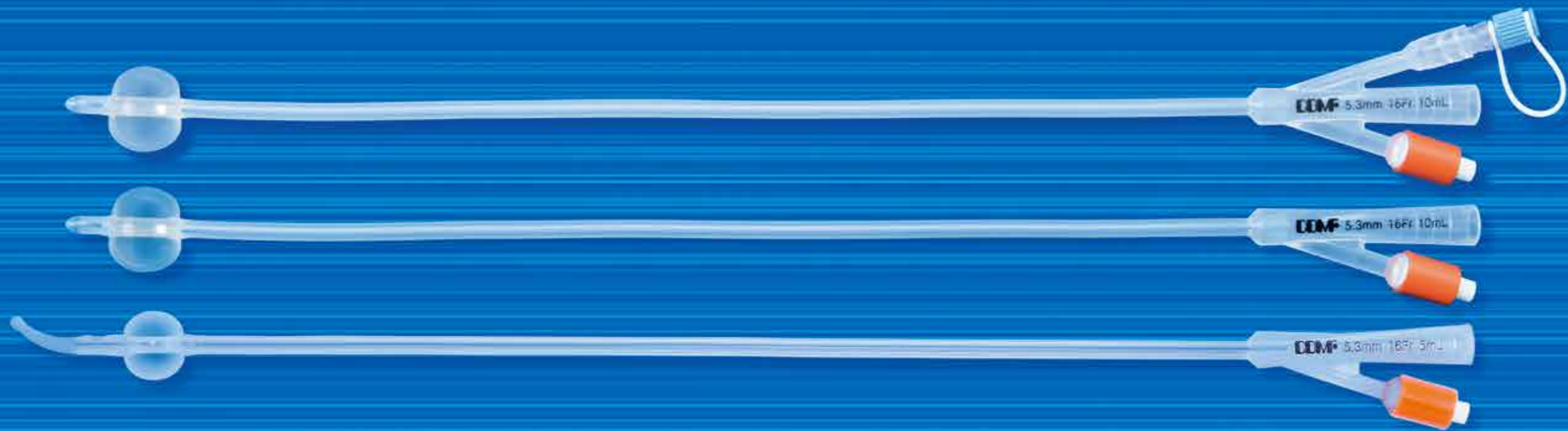

## チーマン型 (ウロシステムⅢ)

◎先端部は、尿道の狭窄した部位を無理なく挿入できるように理想的な角度を付け滑らかに作られています。

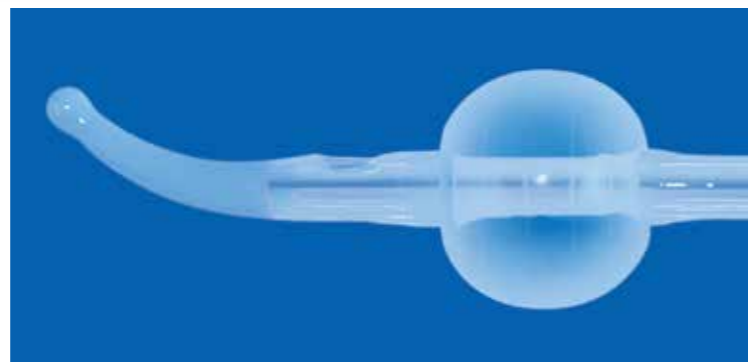

## 滅菌コンファゼリー

◎尿路へのカテーテル挿入用の潤滑剤としてご使用ください。

◎ガンマ滅菌済みで1回のカテーテル挿入に適した容量となっております。



成分: 精製水、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、安定剤