



Closed Foley System

閉鎖式採尿バッグ (ショートタイプ)



COMP IJZJ-

Closed Foley System

閉鎖式採尿バッグ

ショートタイプ





ドリップチャンバー

ドリップチャンバーは排尿路の物理的遮 断により、逆流しにくい構造になってお り、尿がスムーズに落下するようにスト レートタイプにしました。




尿採取口(ニードルレスタイプ)

針刺切創防止対策により、尿採取口は二 ードルレス採尿ポートを採用しました。 採尿時には、針の付いてない一般的なス リップタイプ及びロックタイプのディス ポーザブルシリンジをご使用ください。



排尿部分

排尿時に片手で作業できるコックハンド 導尿チューブを太くすることにより、折 ルを使用することにより、簡単に排尿作 れ曲がりにくくなり、尿の流れもスムー 業ができるようになりました。

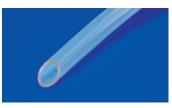

導尿チューブ

ズになりました。また、チューブの内側 を閉塞しにくい形状にしましたので、万 が一折れても尿の流れは確保できます。

製品規格

商品名	商品コード	規格	入数	ケース 入数	JAN⊐-⊦*
閉鎖式採尿バッグ (ショートタイプ)	800025013	2000mL	10枚	6箱	4534089800061

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合もございますのであらかじめご了承下さい。

社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415 TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233 〈E-mail〉 fine@fthree.co.jp (HP) https://www.fthree.co.jp/

1	TΠ	_
τ	埋	冱